

El sistema de ScottCare Holter

Análisis Holter de altas prestaciones

Los productos de ScottCare Holter han conseguido la mayor calidad durante más de 30 años.

Nuestro software de análisis ha sido desarrollado para satisfacer cualquier tipo de consulta desde el doctor hasta las más grandes y sofisticadas universidades hospitalarias y clínicas de investigación.

Los productos de ScottCare Holter, son la opción más común para la mayoría de los usuarios exigentes, porque ofrecen las últimas tecnologías de equipos de registradores y software, soporte 24x7x365, y la actualización gratuita del software durante la vida del sistema.



Chroma - ¡El Holter bajo una nueva luz!

Chroma ofrece, sin compromiso, la realización de equipos clínicos y profesionales en un embalaje delgado y ligero.

Principales innovaciones de la industria

- Uso más fácil gracias a la gran pantalla a colores OLED
- Conexión audible y visual lleva a la desconexión y recordatorio de actividades de medicación
- Validación necesaria de tiras de test
- Registrador totalmente configurable de interfaz y controles
- Última tecnología de marcapasos cardíaco con sensibilidad adaptable
- Registro continuo hasta 21 días, 3 canales, datos de ECG

Veloz, acceso fácil para obtener datos

- Posibilidad de descargar los datos vía USB o mediante tarjeta de memoria
- Rápida descarga de los datos del ECG – en menos de 15 segundos, con análisis automático en menos de 50 segundos.

Tecnología “Smart” conserva la integridad de los datos


- Detección Smart para 5 y 7 derivaciones, con presentación en display de colocación apropiada basada en la conexión del cable
- Set up automático a través del interfaz HL7, descarga los datos del paciente directamente al registrador
- Muestreo de datos adaptable desde 128-1024 muestras por segundo desde 8,10 hasta 12 bits de resolución según las necesidades clínicas y de análisis

Garantiza la atención al paciente

- Uso fácil, la memorización (a colores) digital y cotidiana de los datos elimina la transcripción de los datos a papel
- Las notificaciones audibles ayudan a recordar a los pacientes su medicación
- Guía visual e indicaciones de desconexión para el posicionamiento correcto de electrodos e indicación de desconexión.
- Idioma seleccionable: inglés, español, francés, portugués, italiano, alemán, holandés, finés y danés
- Cinturón, bandolera y bolsas desechables para el confort de los pacientes

RZ153 + Verdadero Registrador de 12 derivaciones

Nuestro autentico registrador de 12 derivaciones verdaderamente continuas, registra cada latido del corazón sin compresión de datos, obteniendo la mejor calidad de datos.

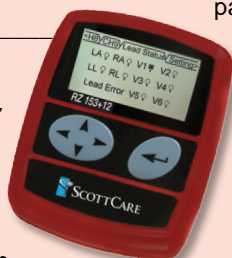

Jericó, 10 bis
08035 Barcelona
Telf: 932 541 540
Fax: 934 185 140

ab
medica sa

www.abmedic.com

El sistema de ScottCare Holter

Análisis Holter de altas prestaciones

El software de HolterCare proporciona informaciones críticas y diagnósticas.

HolterCare utiliza en su análisis técnicas avanzadas para obtener el mejor resultado y facilita el acceso a los datos, involucrando lo menos posible al especialista ofreciendo los valores más precisos.

Mantener el control total de sus datos


- Con un solo clic del ratón, informaciones vitales, incluyendo todos los procesos aritméticos e isquémicos, se confirman y editan visualmente en cada pulsación
- Técnicas de elaboración de comprensión aritmética incluyendo un multi-modelo de elaboración con súper posiciones y posibilidades de evaluación en modo página
- Posibilidad de prever datos y seleccionar el canal correcto de análisis ANTES de elaborarla, presentando eficazmente los mejores resultados

Datos concretos, presentación magnificada

- Latidos diferenciados por colores, pantalla compartida con superposición, gráficos colorados ayudan a los usuarios a localizar las áreas diagnósticas interesantes
- La capacidad de FDA XML evaluación presenta sólo los datos necesarios de mejorando enormemente la eficiencia
- El porcentual A-Fib viene presentada automáticamente en la página de fibrilación arterial

La última tecnología

- HolterCare está compatible con Windows XP y Vista

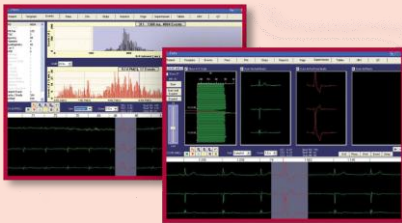

Para informaciones adicionales con respecto a productos diagnósticos no dude en contactarnos.

Opciones para cualquier necesidad

Una variedad de funciones y productos adicionales permitirán maximizar el diagnóstico y la eficiencia operativa

- ✓ **Más datos para una visualización completa**
 - Análisis Holter multidía
 - Variedad de frecuencia del cardíaca-estadística y espectral
 - Simple y seguro análisis de marcapasos
 - Valores completos registrados
- ✓ **Acceso rápido – datos trasferibles**
 - Múltiples estaciones de revisión y transferencia del EZLink para ECG desde sitios remotos vía internet
- ✓ **Asegurado el cumplimiento**
 - Software HIPAA con conectividad de interfaz HL7
- ✓ **Herramientas adicionales de diagnósticos CardioView DX**
 - El software EventCare simplifica la monitorización de los procesos de arritmia y marcapasos, mientras proporciona precisión en la medición de múltiples eventos durante más de 30 días
 - La autodetección wireless EventConnect, monitores de supuesto autentica, proveen la última tecnología en detección de eventos.
 - El registro de la presión arterial ambulatoria con el software ABPCARE, es capaz de recoger más de 300 mediciones y 9 protocolos.
- ✓ **Cardiolife – ofrece los datos que usted quiere de la manera más adecuada**

Cardiofile, es un banco de datos con informaciones cardiovasculares que facilita la generación de reportajes clínicos y administrativos ayudándole a obtener datos más detallados de los pacientes. Esto es una parte de CardioView Dx que ofrece una plataforma común para todas las soluciones diagnósticas.

Jericó, 10 bis
08035 Barcelona
Telf: 932 541 540
Fax: 934 185 140


medica sa
www.abmedic.com